

CE



Mewa

Návod k obsluze a použití

Vydání 8 ze dne. 2022-10-25

Speciální zdravotní kočárek MEWA

Moderní zdravotní kočárek s vynikajícími jízdními vlastnostmi

! POZOR! Uživatele se zrakovým, čtecím nebo mentálním postižením žádáme, aby podali zprávu výrobcí a vyžádali si informace pro uživatele ve vhodném formátu.

Účel příručky

Návod k obsluze a údržbě obsahuje základní informace nezbytné pro správné používání zdravotního kočárku Mewa, včetně bezpečnostních pravidel pro jeho použití. Popis konstrukce, provoz a nastavení kočárku k použití, údržbu a čištění zdravotního kočárku a záručních podmínek.

Je určen osobám, které se přímo starají o postižené děti (asistenty dítěte - rodiče, opatrovníky), kteří budou kočárek obsluhovat. Určen je také pro lékaře a rehabilitační pracovníky obsluhující zdravotní kočárek.

POZOR! Před použitím kočárku je uživatel povinen seznámit se s obsahem této příručky

Tato příručka je nedílnou součástí produktu a pokaždé, když musí být dodána k prodávanému produktu. **Uschovejte tuto příručku pro budoucí použití!** Návod je potřeba uložit na dobře přístupném místě.

Návod v elektronické verzi je k dispozici na webových stránkách www.mywam.eu

POZOR! V případě jakéhokoli zdravotního incidentu souvisejícího s přítomností zdravotního kočárku Mewa musíte neprodleně písemně informovat výrobce tím, že jej kontaktujete doporučeným dopisem nebo e-mailem s potvrzením o přijetí.

Kontaktní údaje výrobce:

- adresa: MyWam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska
- telefon: +48 32 733 11 31
- e-mail: mywam@mywam.pl



Vydání: 8, 2022-10-25

MyWamKupiec, Bartold, Angres sp.j. si vyhrazuje právo provádět technické a komerční změny obsahu příručky pro provoz a údržbu bez předchozího upozornění. Každá změna bude určena podle data, kdy byla příručka naposledy aktualizována

Obsah

▪ Úvod.....	6
1. Účel zdravotního kočárku Mewa	6
2. Základní informace o Mewa.....	6
3. Rychlé sestavení.....	7
▪ Bezpečnost.....	8
4. Důležité tipy a bezpečnostní pravidla.....	8
5. Tabulky	9
5.1 Typový štítek	9
5.2 Štítek s kódem UDI	9
6. Výstražné tabulky.....	9
7. Použité symboly	9
▪ Produkt	10
8. Obecná konstrukce kočárku.....	10
9. Konfigurace a použití - rám kočárku	11
9.1. Skládací mechanismus rámu.....	11
9.2 Rozložení rámu kočárku. Transportní zámek.....	11
9.3 Složení rámu.....	11
9.4 Plná otočná přední kola. Montáž a demontáž. Zámek předního kola.....	12
9.5 Zadní kola, plná. Montáž a demontáž zadních kol na nápravu.....	12
9.6 Systém tlumení nárazů zadního kola	13
9.7 Ergonomická rukojeť pro tlačení kočárku. Mechanismus a nastavení úhlu rukojeti.	13
9.8 Centrální brzda. Zajištění a uvolnění brzdy.....	14
9.9 Nášlapný pedál.....	14
9.10 Převodní rukojeť	14
10. Konfigurace a použití - terapeutické sedadlo s opěradlem	15
10.1 Montáž a demontáž sedadla k rámu	15
10.2 Nastavitelné sedadlo, tzv "kolébka"	15
10.3 Nastavitelné opěradlo.....	16
11. Základní příslušenství	16
11.1 Pětibodové pásy.....	16
11.2 Bezpečnostní zábrana	17

11.3	Nastavitelná stříška s oknem	17
11.4	Nákupní košík	18
11.5	Pásy stabilizující sed	18
11.6	Klin.....	18
11.7	Polstrované vložky	18
11.8	Čalounění.....	18
12.	Možné doplňky	19
12.1	Peloty hlavové s nastavením \leftrightarrow nebo \updownarrow	19
12.2	Peloty hrudní - bederní s nastavením, \leftrightarrow nahoru \updownarrow	19
12.3	Stolík terapeutický	19
12.4	Zúžující měké vložky.....	20
12.5	Turistická taška	20
12.6	Slunečník	20
12.7	Rukavice zimní.....	20
12.8	Nánožník.....	21
12.9	Moskytiéra	21
12.10	Pláštěnka	21
13.	Technická specifikace kočárku Mewa	22
14.	Dodávka a nástroje	22
15.	Montáž a demontáž kočárku	23
16.	Příprava k použití	24
17.	Používání kočárku	24
17.1	Přemísťování kočárku.....	24
17.2	Nastupování a vystupování ze zdravotního kočárku	25
17.3	Správná poloha v kočárku	25
17.4	Jízda s kočárkem.....	25
17.5	Pohyb na nerovném povrchu - svahu	25
17.6	Překonávání prahů nebo obrubníků	26
17.7	Přeprava v automobilu a v jiných vozidlech.....	26
17.8	Čištění a péče	26
18.	Uskladnění kočárku	27

18.1	Příprava kočárku na dlouhodobé skladování.....	27
18.2	Ochrana proti korozi	27
19.	Znovu použití.....	28
20.	Servis a pravidelné kontroly.....	28
21.	Využití.....	29
22.	Soulad s požadavky na zdravotnické prostředky	30
23.	Poznámky	31
24.	Seznam autorizovaných servisních míst	32
25.	Záruční list	33

▪ Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení speciálního kočárku Mewa. Doufáme, že se přičiní k mnoha nádherným okamžikům s Vaším dítětem a bude Vám každý den nápomocen. Vyvíjíme veškeré úsilí, abychom zajistili, že naše produkty splní Vaše očekávání a nejvyšší standardy. Doporučujeme Vám kontaktovat naše zaměstnance a sledovat nás na našich webových stránkách www.ladol.eu, www.mywam.eu a na sociálních médiích. Zde se můžete dozvědět spoustu zajímavých věcí o našich produktech.

1. Účel zdravotního kočárku Mewa

"Mewa" je multifunkční zdravotní kočárek určený pro děti se zdravotním postižením. • Kočárek se skládá z rámu z hliníkových a ocelových profilů. Umožňuje rychlou demontáž kol. „Mewa“ je kompletní terapeutický systém, který umožňuje nastavit úhel opěradla a opěrky nohou, délku opěrky nohou, polohu opěrky hlavy atd. Produkt je vybaven řadou příslušenství zlepšujících funkčnost a pohodlí při používání, jako např. terapeutický stůl, bezpečnostní pásy, klín, pláštěnka, moskytiéra, nánožník, nákupní taška atd. Uživatelé nemohou obsluhovat zdravotní kočárek samostatně, ale pouze za pomoci doprovodu. Kočárek je možno používat uvnitř i venku, na různém povrchu (asfalt, beton, kámen, štěrk) a za různých povětrnostních podmínek. Jiné použití produktu než je uvedeno je zakázáno. Kočárek smí používat s návodem k použití pouze dospělá osoba pečující o uživatele. Mládež a děti i jakékoli jiné osoby bez vhodného zaškolení by produkt neměly používat.

Zdravotní kočárek „Mewa“ je zdravotnický prostředek třídy I indikován pro použití postiženými dětmi, které kvůli svému stavu nemohou samostatně chodit nebo se sedět. Výrobek je určen a navržen k přepravě a pohybu výše uvedených osob v pozici sedící nebo ležící s korekcí polohy. Klinické indikace zahrnují mozkovou obrnu, meningeální kýly, dystrofie, parézy atd. Produkt je určen pro uživatele ve věku od 3 do 10 let. Produkt by měl být používán podle doporučení ošetřujícího lékaře nebo fyzioterapeuta.

Kontraindikace:

V případě kontraindikací polohy v sedu, případně pasivní vzpřímené polohy je nutné nastavení kočárku konzultovat s fyzioterapeutem nebo ošetřujícím lékařem.



2. Základní informace o Mewa

Zdravotní kočárek Mewa má mnoho možností, např.:

- nastavení úhlu opěradla (viz bod 10.3)
- nastavení sklonu opěradla a sedadla "Kolébka" (viz bod 10.2)
- nastavení hloubky sedla - vložky (viz bod 12.4)
- nastavení stupačky (viz bod 9.11)
- regulace pelot (viz bod 12.1 i 12.2)
- další vybavení (viz bod 12)

3. Rychlé sestavení

Chcete-li kočárek rychle použít, rozbalte jej a připravte na použití podle bodu 15, montáž a demontáž kočárku a bodu 16, příprava k použití. Schematický diagram je uveden níže, ale nenahrazuje pečlivé přečtení celého manuálu

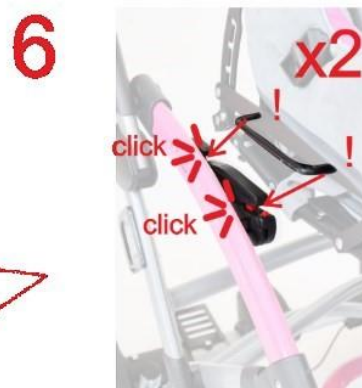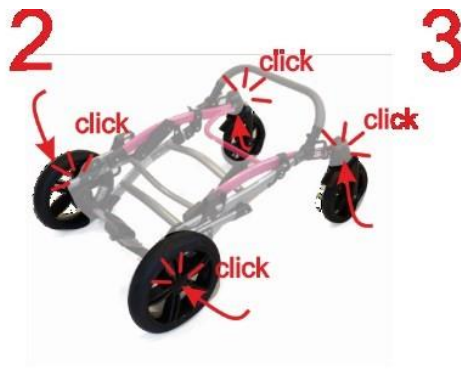

▪ Bezpečnost

4. Důležité tipy a bezpečnostní pravidla

- Pravidla je zakázáno používat kočárek způsobem, pro který není určen
- Produkt Výrobek obsahuje malé části, které mohou být při požití pro dítě nebezpečné !
- Vzhledem k velkým možnostem nastavení kočárku při úhlovém nastavení sedadla a úhlovém nastavení opěradla, je možné nastavit polohu, ve které se ocitne hlava pod pánevní linií. Je zakázáno používat takovéto nastavení, jenž by mohlo vést k riziku zadušení ,nebo udušení dítěte.
- Je zakázáno klást na kočárek jakékoli další závaží, což se zejména týká položení další zátěže na zadní stranu opěradla, například batohu nebo tašky. Může to způsobit převrácení kočárku Mewa a může dojít ke zranění uživatele! Toto se nevztahuje na originální a další příslušenství určené pro kočárek Mewa nepřekračující povolené hodnoty zatížení. Všechny další prvky připevněné ke kočárku ovlivňují jeho stabilitu!
- POZOR! V závislosti na provedených úpravách zdravotního kočárku Mewa - týkající se nastavení rukojeti pro tlačení kočárku, nastavení výšky opěradla, úhlového nastavení opěradla, nastavení hloubky sedadla, úhlového nastavení sedadla, nastavení úhlu opěrky nohou a nastavení opěrky nohou - je možné že kočárek může překročit doporučené maximální rozměry.
- POZOR! Při každém použití zdravotního kočárku postupujte podle pokynů uvedených níže. V případě jakýchkoli pochybností nesmí být kočárek používán. V takovém případě se doporučuje urgentně kontaktovat prodejce a nebo výrobce o radu.
- POZOR! Při jízdě dveřmi nebo podobnými zúženími, která omezují průjezdnost kočárku, se ujistěte že na obou stranách kočárku je dostatečný prostor, a je tak zabráněno zachycení rukou, nebo jiných částí těla a nemůže dojít k poškození kočárku.

VAROVÁNÍ!

- Nikdy nenechávejte své dítě v kočárku bez dozoru, toto by mohlo být nebezpečné !
 - Tento výrobek není vhodný pro běh, bruslení nebo in-line brusle.
 - Zdravotní kočárek není určen k použití jako autosedačka v motorovém vozidle.
 - Dávejte pozor na mezery a pohyblivé části - nebezpečí uskřípnutí.
 - Nepřenášejte kočárek s dítětem.
- Kočárek je dodáván k kartonu. Karton není určen ke hraní. Uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí. Nenasazujte na hlavu. Nebezpečí udušení!



- POZOR! Je zakázáno používat kočárek, pokud je technický stav kočárku, nebo některá jeho součást vadná, nebo má uživatel o tom jakékoli pochybnosti, kočárek je jakkoli poškozený, nebo existuje pouze podezření na poškození ,nebo kočárek nefunguje správně. V takové situaci se doporučuje neprodleně kontaktovat prodejce a nebo výrobce s žádostí o radu.

5. Tabulky

5.1 Typový štítek

Na typovém štítku jsou základní informace o produktu: název, model, sériové číslo (identifikační), maximální nosnost, datum výroby, potvrzení shody produktu pro zdravotnické prostředky, upozornění o souladu s příručkou pro provoz a údržbu, potvrzení že jde o zdravotnický prostředek a údaje výrobce (obr. 5.1.)

- Štítek upozornění je umístěn na rámu příčně v zadní Obr.. 5.1 části rámu kočárku, na jeho levé straně připevněný nahoře.

5.2 Štítek s kódem UDI

Štítek s UDI kódem obsahuje informace o produktu: název, model, UDI kód a údaje výrobce (obr. 5.2).




Obr. 5.1



Obr. 5.2

6. Výstražné tabulky

- Důležité informace jsou uvedeny na varovném štítku varování pro uživatele (viz obr. 6.1)
- Na zadní / boční straně je výstražný štítek části rámu, na obou stranách.

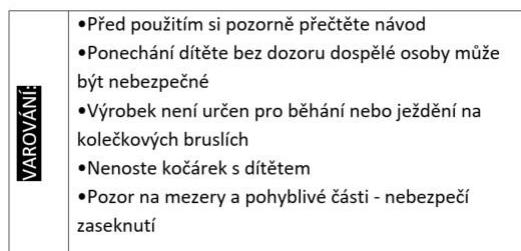

Obr. 6.1

7. Použité symboly

	Sériové číslo produktu		Název výrobce
	Celková přípustná hmotnost uživatele		Dotyčný výrobek je zdravotnickým prostředkem
	Datum výroby		POPIS „ VAROVÁNÍ! “ a symbol v této příručce slouží k posílení pozornosti čtenáře k obsahu označenému tímto symbolem. Nedodržení obsahu označeného tímto popisem může představovat ohrožení zdraví a bezpečnosti uživatele a doprovodných osob a může také poškodit produkt.
	Značka shody podle směrnice o zdravotnických prostředcích		
	Varování, abyste držovali příručku pro používání a údržbu produktu		

▪ Produkt

8. Obecná konstrukce kočárku

Zdravotní kočárek Mewa se skládá ze dvou hlavních částí: rámu kočárku se sedákem a opěradlem, opěrky nohou a široké škály doplňkového vybavení, které by mělo být vybráno podle individuálních potřeb uživatelů.

• Standardní vybavení

Do standardního vybavení kočárku patří:



1 - Nastavitelná stříška	- viz. 11.3
1 - Ergonomická rukojeť kočárku	- viz. 9.7
2 - Pětibodové pásy	- viz. 11.1
3 - Mechanismus nastavení opěradla a sedadla	- viz. bod 10.2
4 - Převravní zámek	- viz. bod 9.2
5 - Nastavitelná opěrka nohou s popruhy	- viz. bod 9.11
6 - Zadní kola, plná	- viz. bod 9.5
7 - Zámek předního kola	- viz. bod 9.4
8 - Přední otočná plná kola	- viz. bod 9.4
9 - Bariérka zabezpečující	- viz. bod 11.2
10 - *Bezpečnostní zábrana	- viz. bod 11.6
11 - Čalounění opěradla a sedadla	- viz. bod 17.8
12 - * Pásy stabilizující sed	- viz. bod 11.5
13 - Centrální brzda	- viz. bod 9.8
14 - Nášlapný pedál	- viz. bod 9.9
15 - Systém odpružení zadního kola	- viz. bod 9.6
17 - Polstrované polštáře	- viz. bod 11.7

*) volba

Možné doplňky

Jako příslušenství se nabízí (možnosti):

- Terapeutický stůl - viz. bod 12.3
- Zužující mělké vložky - viz. bod 12.4
- Peloty - viz. bod 12.1&12.2
- Turistická taška - viz. bod 12.5
- Nákupní košík - viz. bod 11.4
- Pláštěnka - viz. bod 12.10
- Zimní rukavice - viz. bod 12.7
- Nánožník - viz. bod 12.8
- Moskytiéra - viz. bod 12.9
- Slunečník - viz. bod 12.6



9. Konfigurace a použití - rám kočárku

9.1. Skládací mechanismus rámu


Skládací mechanismus rámu je umístěn uvnitř rámu a na rámu na dvou místech v pravé části a na třech místech v levé části. Viz foto. 9.1. Popisující toto místo shora, ze strany rukojeti kočárku, jsou:

- pravá a levá pojistka - prvek, který umožňuje složení horní části rámu za účelem zmenšení jeho rozměrů
- skládací mechanismus rámu s pojistkou



Obr. 9.1.
Skládací body rámu

9.2 Rozložení rámu kočárku. Transportní zámek.

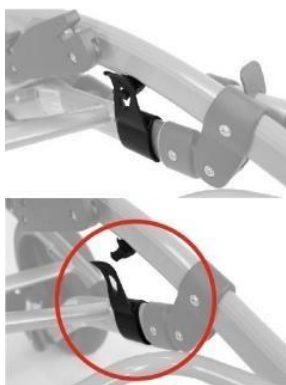

Obr. 9.2.1
Transportní zámek



Obr. 9.2.2
Rozložení rámu

Rozložení (otevření) rámu kočárku: položte rám kočárku vodorovně na zem a odjistěte přepravní zámek (obr. 9.2.1). Potom lehce zatáhněte za opěradlo do svislé polohy (obr. 9.2.2.). Chcete-li kočárek postavit, opatrně zatáhněte za rukojeť, lehce ji zvedněte nahoru a kočárek nastavte do požadované polohy, dokud nezapadne zámek sklopení rámu. Rám zdravotního skládacího mechanismu rámu.

9.3 Složení rámu

Složení rámu zdravotního kočárku: Stiskněte červené tlačítko (obr. 9.3.1) na horní straně skládacího mechanismu a současně vytáhněte obě rukojeti (obr. 9.3.2) na horní straně skládacího mechanismu. Poté sklopte rám kočárku a zajistěte přepravní zámek.

kočárku bude správně rozložen pouze tehdy, když je sklopný mechanismus správně uzavřen. O tom svědčí jasný zvuk „cvaknutí“ vycházející z dobře uzavřeného



Obr. 9.3.1
Červené tlačítko

Obr. 9.3.2
Skládací mechanismus rámu

9.4 Plná otočná přední kola. Montáž a demontáž. Zámek předního kola

Použitá, odolná kola zaručují nejvyšší kvalitu jízdy, potěšení z jízdy a elegantní vzhled. Pneumatiky jsou bezdušové, vyplněné speciálním gelem, který má vlastnosti tlumení nárazů velmi podobné vlastnostem nafukovacích kol. Kola jsou z výroby namontována ve vidlicích předních kol, která jsou nahoře zakončena řídicími nápravami. Obě přední kola lze nastavit pro přímou jízdu, nebo odjištěná pro zatáčení, což výrazně usnadňuje manévrování s kočárkem. Díky směrovému zámku předních kol a možnosti jeho odjištění nebo zajištění je zajištěno při řízení kočárku větší pohodlí pro dítě i pro asistenta. Při jízdě s kočárkem na zcela hladkém povrchu, například v nákupních centrech, ve školách, se doporučuje odjistit zámek a umožnit protáčení předních kol.

- **Montáž.** Nasazení předních kol. Za tímto účelem zasuňte osu kola do otvoru rychlého systému, dokud nezaklapne. O správném uchycení kola svědčí jasný zvuk „cvaknutí“. Uvolnění předních kol. Chcete-li kola sejmout, stiskněte tlačítko na systému rychlého uvolnění a sundejte kolo. Viz obr. 9.4.1



Obr. 9.4.1
Tlačítko rychlé demontáže

- **Směrový zámek.** V případě nerovných povrchů, jízdy na svahu, při překračování prahů nebo obrubníků se doporučuje zablokovat otáčení předních kol. Chcete-li zablokovat otáčení předních kol, otáčejte knoflíkem, dokud nezapadne zámek - viz obr. 9.4.2.



Obr. 9.4.2
Otočný knoflík zámku otáčejícího

9.5 Zadní kola, plná. Montáž a demontáž zadních kol na nápravu

Použitá, odolná kola zaručují nejvyšší kvalitu jízdy, potěšení z jízdy a elegantní vzhled. Pneumatiky jsou bezdušové, vyplněné speciálním gelem, který má vlastnosti tlumení nárazů velmi podobné vlastnostem nafukovacích kol. Díky možnosti demontáže kol i jejich náprav je kočárek po složení menší, což usnadňuje jeho přepravu a skladování. Mechanismus upevnění kol je namontován uvnitř zadních kol a zajišťuje rychlou instalaci a demontáž zadních kol. Aktivuje se stisknutím rychloupínacího zámku (obr. 9.5.1.) Směrem ke středu kola a potom můžete zadní kolo nasadit na osu zadního kola nebo sejmout zadní kolo z osy zadního kola.



Obr. 9.5.1
Rychloupínací zámek

- **Montáž kol na osy**

Při instalaci zadního kola na nápravu zadního kola stiskněte zámek ve středu kola a položte kolo na začátek jeho nápravy. Poté přestaňte tlačít na zámek a pokračujte v natahování kola na jeho osu, dokud nezaklapne. O správné instalaci kola svědčí jasný zvuk „cvaknutí“ vycházející z mechanismu rychlé montáže zadních kol na nápravu.

- **Demontáž kol z osy**


Chcete-li demontovat zadní kolo z osy zadního kola, stiskněte zámek ve středu kola a vytáhněte kolo z jeho osy. - Obr. 9.5.2.



Obr. 9.5.2
Demontáž kola

9.6 Systém tlumení nárazů zadního kola

Kočárek má odpružení tlumení nárazů rámu a zadních kol, které je umístěno na koncích zadního rámu a je v kontaktu s příčnickem. Odpružení funguje automaticky. Nastavení se provádí aktivací páčky nahoru - dolů umístěné ve spodní části tlumiče - viz obr. 9.6. Aby se usnadnilo přepínání nastavení pomocí páčky, je stlačena pružina tlumiče. Díky přepnutí páky bude pružina tlumiče stlačena (volitelně pro tvrdý podklad) nebo povolena (měkký podklad).

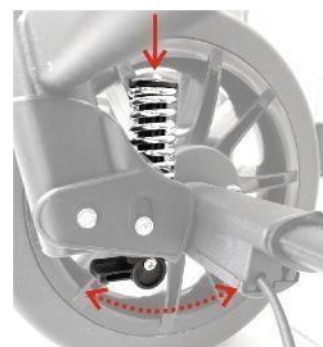

Obr. 9.6
Odpružení s regulací

9.7 Ergonomická rukojeť pro tlačení kočárku. Mechanismus a nastavení úhlu rukojeti.

Madlo kočárku poskytuje pevné uchopení za různých jízdních podmínek. Lze jej upravit tak, aby se nastavila výška rukojeti asistenta, který vede kočárek - obr. 9.7



Obr. 9.7

Mechanismus nastavení úhlu rukojeti

- **Mechanismus regulace**

Jedná se o dvě tlačítka na vnější straně rámu, která se nacházejí na kloubech tlačné rukojeti.

- **Úhlové nastavení rukojeti pro tlačení kočárku** Chcete-li změnit úhel rukojeti, stiskněte obě tlačítka mechanismu nastavení úhlu rukojeti současně a změňte úhel rukojeti. Jakmile je rukojeť ve správné poloze, uvolněte tlačítka a rukojeť se automaticky uzamkne v požadované poloze.

9.8 Centrální brzda. Zajištění a uvolnění brzdy.

Centrální brzdový pedál (obr. 9.8), který při přímém sešlápnutí zablokuje obě zadní kola zdravotního kočárku, je umístěn ve středu příčnicku v zadní části rámu kočárku.

- **Zajištění a uvolnění brzdy**

Chcete-li zabrzdít centrální brzdu, sešlápněte brzdový pedál směrem dolů k zemi, až zaklapne. Správné zabrzdění brzdy je potvrzeno zřetelným „cvakavým“ zvukem vycházejícím z centrální brzdy. Pro odbrzdění centrální brzdy zatáhněte brzdový pedál nahoru.



Obr.9.8
Centrální brzda



Obr. 9.9
Nášlapný pedál

9.9 Nášlapný pedál

Nášlapný pedál (obr. 9.9) je umístěn na pravé straně příčnicku v zadní části rámu podvozku. Chcete-li jej použít, stiskněte nášlapný pedál a současně zatáhněte za rukojeť kočárku směrem k sobě, což způsobí, že se přední část kočárku nadzvedne s předními koly.

Použití nášlapného pedálu usnadňuje kočárku překonávání malých prahů nebo obrubníků.

9.10 Převravní rukojeť

Rukojeť pro přenášení rámu kočárku je umístěna mezi nastavci nákupního košíku. (Obrázek 9.10)



Obr.9.10
Převravní rukojeť

9.11 Podnožka. Nastavení a použití.



Obr. 9.11
Regulace podnožky

Nastavitelná opěrka nohou je součástí standardní zdravotního kočárku Mewa.

- **Nastavení výšky opěrky nohou.** Chcete-li změnit výšku opěrky nohou, odšroubujte šrouby pomocí křížového šroubováku (obr. 9.11), poté nastavte opěrku nohou dopříslušné výšky a zajistěte opěrku nohou pomocí šroubů.
- **Mechanismus úhlového nastavení celé stupačky.** Chcete-li změnit sklon stupačky, stiskněte tlačítka označená na fotografii na obou stranách stupačky, poté nastavte příslušnou polohu a uvolněte tlačítka.
- **Použití stupačky.** Doporučujeme podnožku nastavitv takové výšce, aby na ní mohly nohy dítěte volně spočívat celou svou plochou, a zároveň jsou stehna dítěte

rovnoběžně sedákem. Deska stupačky má pásy, které zajišťují nohy dítěte.

Při používání kočárku se doporučuje je nasadit. Standardně je stupačka ve vodorovné poloze.

Během přepravy, skladování, rehabilitace, nastupování a vystupování z kočárku Mewa však musí být stupačka sklopena a otočena směrem k rámu stupačky.

10. Konfigurace a použití - terapeutické sedadlo s opěradlem

10.1 Montáž a demontáž sedadla k rámu

Dvě západky rámu sedadla jsou velmi důležitými prvky konstrukce kočárku. Slouží k připojení sedadla kočárku k rámu kočárku. Správné usazení háků na rám je důležité pro bezpečnost vašeho dítěte a ostatních. Vždy věnujte zvláštní pozornost absenci trhlin, poškození háků rámu a jeho správnému fungování. V případě jakýchkoli podezření kočárek nepoužívejte, protože by mohl ohrozit uživatele a další osoby!

- **Sestavení sedadla.** Sedadlo lze namontovat jak ve směru tak protisměru jízdy.



Obr. 10.1.1
Západky na rámu



10.1.2
Páčka uvolnění sedáku

Na upevnění sedadla, vložte sedlo do západek rámu. Zatlačte na sedadlo, dokud neuslyšíte dvě cvaknutí. O právném nastavení sedadla svědčí jasný zvuk cvaknutí“ vycházející z obou háků rámu. Viz obr. 10.1.1.

- **Demontáž sedadla.** Demontáž sedadla. Pro demontáž sedadla odjistěte pojistky na rámu směrem dolů. Nachází se na obou stranách kočárku na spodní straně obou háků rámu (obr. 10.1.2). Poté vysuňte sedadlo z háků rámu.

10.2 Nastavitelné sedadlo, tzv "kolébka"

Kočárek je vybaven sedadlem, které lze nastavit do 4 různých poloh náklonu (kolébky). Chcete-li změnit úhel sedadla, zatáhněte za ocelovou rukojeť na zadní straně opěradla sedadla a pomalu změňte úhel sedadla. Jakmile je sedadlo v požadované poloze, uvolněte rukojeť.

VAROVÁNÍ! Každá změna sklonu sedadla mění celkové těžiště. To ovlivňuje stabilitu kočárku. **VAROVÁNÍ!** veškeré úpravy kočárku a jeho součástí by měly být prováděny BEZ DÍTĚTE v kočárku! Nedodržování výše uvedených varování může být pro uživatele a dítě nebezpečné!



Obr. 10.2
Regulace sedadla

10.3 Nastavitelné opěradlo

Kočárek je vybaven vyztuženým opěradlem, které lze nastavit do různých poloh náklonu. Od sedu do polohy vleže. Chcete-li změnit sklon opěradla, je třeba jej uvolnit mírným posunutím celého opěradla směrem k sedící poloze. Poté vytáhněte rukojeť na zadní straně opěradla nahoru a pomalu změňte úhel opěradla. Po nastavení opěradla do správné polohy sklopte rukojeť umístěnou na zadní straně opěradla.

VAROVÁNÍ! Každá změna sklonu opěradla vyžaduje opětovné nastavení délky pětibodových pásů
Seřízení by se mělo provádět se zabrzděnou brzdou!



Obr. 10.3

Rukojeť pro nastavení úhlu opěradla

POZOR! Veškerá nastavení kočárku a jeho prvků by mělo být prováděno **BEZ DÍTĚTE** v kočárku! Nedodržení výše uvedených varování může být pro uživatele a dítěte nebezpečné!

11. Základní příslušenství

11.1 Pětibodové pásy

Zdravotní kočárek Mewa je standardně vybaven profesionálními pětibodovými bezpečnostními pásy.

- Nastavení pětibodových pásů. Po usazení dítěte musí být zajištěno pětibodovými pásy. Chcete-li upravit délku pásů, posuňte seřizovací prvky na postroji nahoru nebo dolů a odpovídajícím způsobem posuňte chrániče. Pro výškové nastavení pásu přemístěte postroj nahoru nebo dolů.
- Použití. Pětibodový pás, nasadte dítěti na pravou a levou stranu a poté zapněte oba postroje do spony pro připevnění bezpečnostních pásů, které jsou připevněny k sedačce. Chcete-li z dítěte odepnout pětibodové pásy, stiskněte tlačítko na dolní sponě a odepněte oba postroje. Pomalu stáhněte postroj z pravé a levé strany dítěte.



Obr. 11.1

Pětibodové pásy

Varování! Každá změna úhlu sklonu opěradla vyžaduje opětovné nastavení délky pětibodových pásů.

11.2 Bezpečnostní zábrana

Zdravotní kočárek Mewa může být vybaven bezpečnostní bariérou, která v případě určitých indikací zabraňuje pádu sedícího dítěte..

- Montáž a demontáž zábrany. Bezpečnostní zábrana se montuje stejnými spojovacími prvky jako terapeutický stůl, proto oba tyto prvky nelze použít současně. Chcete-li nainstalovat bezpečnostní zábranu, zasuněte jej do držáku stolíku nebo zábrany, dokud nezaklapne. Zábrana bude správně nainstalována, pouze pokud je správně zasunuta do držáku stolíku nebo zábrany. O tom svědčí jasný zvuk „cvaknutí“ vycházející z dobře připojeného upevnění stolíku nebo zábrany. Chcete-li zábranu demontovat, stiskněte dvě tlačítka na držáku stolíku nebo zábrany a vysuňte zábranu ven.



Obr. 11.2
Bezpečnostní zábrana

11.3 Nastavitelná stříška s oknem

Zdravotní kočárek Mewa může být vybaven nastavitelnou stříškou s oknem, které pomáhá chránit dítě před sluncem nebo deštěm. Prvky stříšky jsou: rám stříšky (přední a zadní oblouk), mechanismus nastavení otevírání stříšky (pravý a levý), dvě západky s červenými tlačítky upevňující stříšku k rámu, čalounění stříšky a okno s moskytiérou a zipem..

- Montáž. Nastavitelná stříška s oknem je připevněna ke dvěma plastovým prvkům na vnějších stranách horního řadla. Chcete-li sestavit stříšku, nastavte opěradlo do svislé polohy a poté posuňte obě západky stříšky rovnoběžně s úchyty na opěradle. Nainstalujte stříšku tak, aby čalounění zadní / spodní strany překrývalo zadní část kočárku.
- Demontáž. Chcete-li demontovat stříšku s oknem, stiskněte dvě červená tlačítka na sponách zajišťujících stříšku a vysuňte západky z úchytů na opěradle
- Použití. Chcete-li změnit velikost oblasti stříšky, uchopte přední a zadní oblouk rámu stříšky a nastavte požadovanou polohu přiblížením obou oblouků k sobě. Mechanismus pro automatické přizpůsobení velikosti povrchu vrchlíku se automaticky uzamkne. Zvláštností stříšky je okno s moskytiérou zajišťující větrání. Okno se otevírá a zavírá na zip.



Obr. 11.3
Nastavitelná stříška

11.4 Nákupní košík

Kočárek je vybaven nákupním košíkem, který je připevněn ke spodní části rámu kočárku. Nákupní košík slouží k přepravě drobných běžných průmyslových předmětů každodenního života, odolných proti nárazům, otlakům, namočení, rozlití a znečištění. Maximální náplň nákupního košíku je 3 kg.



Obr. 11.4
Nákupní košík

11.5 Pásy stabilizující sed



Obr. 11.5
Pásy stabilizující sed
nebodolů.

Pásy stabilizující sed slouží : jako další stabilizace pánve a zabraňují vyklouznutí dítěte z kočárku. Správný způsob aplikace spočívá v upevnění na stehnech dítěte takovým způsobem, aby byla pánev dítěte zajištěna co nejbližší k opěradlu. To zajistí zdravější a pohodlnější polohu dítěte v kočárku

- Seřízení. Chcete-li upravit délku řemínek stabilizujících sed, posuňte seřizovací prvky na předních řemíncích řemínek nahoru
- Použití. Aby bylo možné nasadit pásy stabilizující sed dítěte posadíte dítě na instalované popruhy, potom zabalte nohu dítěte a připevněte obě přezky pásu k oběma předním popruhům. Chcete-li z dítěte sundat pásy stabilizující sed, odepněte obě přezky pásu z předních popruhů.

11.6 Klin

Zdravotní kočárek Mewa může být vybaven klínem, který v případě určitých indikací zajistí vychýlení dolních končetin dítěte od středu těla (nakloněním do stran). Klín má dvoustupňovou úroveň nastavení. Viz obr. 11.6..



11.6
Klín



Obr. 11.7
Polstrované vložky

11.7 Polstrované vložky

Kočárek Mewa je vybaven vložkami jejich spodní strana je vybavena k zajištění na opěradle suchým zipem, pokud není nainstalováno žádné další příslušenství. Viz obr. 11.7.

11.8 Čalounění

Kočárek Mewa je vybaven čalouněním, které je kvůli čištění zcela odnímatelné. Za tímto účelem odepněte všechny prvky, které jej připevňují k rámu kočárku. Jak čistit čalounění je popsáno v bodě 17.8. Čištění a péče.

12. Možné doplňky

12.1 Peloty hlavové s nastavením ↔ nebo ↕

Chcete-li seřadit peloty opěrky hlavy, musíte otevřít čalounění na přední a zadní straně opěradla. Poté odšroubujte knoflíky (hvězdice), které jsou umístěny na zadní straně opěradla. Přesuňte peloty na vhodné místo pro dítě na přední straně opěradla. Přišroubujte peloty pomocí knoflíků. Nakonec zavřete čalounění na přední a zadní straně opěradla..




Obr. 12.1.

Pohled na kočárek s podpěrami

12.2 Peloty hrudní - bederní s nastavením, ↔ nahoru ↕

Chcete-li nastavit hrudní a bederní podpěry, rozepněte čalounění na přední (obr. 12.2.1) a zadní stran opěradla.(Obr. 12.2.2). Poté odšroubujte knoflíky (hvězdice) Obr. 12.2.3), které jsou umístěny na zadní straně opěradla a dejte podložky na vhodné a bezpečné místo pro dítě na přední straně opěradla. Polštářky by měly být utaženy pomocí knoflíků. Nakonec uzavřete čalounění na přední a zadní straně opěradla (obr. 12.2.4).

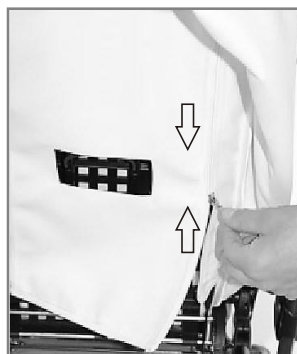

Obr. 12.2.1.

Odepnutí čalounění

Obr. 12.2.2.

Odepnutí čalounění

Obr. 12.2.3.

Vyšroubujte šrouby

Obr. 12.2.4.

Upevnění čalounění

12.3 Stůl terapeutický

Kočárek je vybaven protiskluzovým terapeutickým stolem s maximální nosností 3 kg. Chcete-li sestavit stůl, vložte jej do držáku stolu nebo zábrany, dokud nezaklapne. Stůl nebude správně nainstalován, dokud nebude správně zasunut do držáku stolu nebo zábrany. O tom svědčí jasný zvuk „cvaknutí“ vycházející z dobře připojeného upevnění stolu nebo zábrany.



Obr. 12.3

Stůl terapeutický

Chcete-li stolek demontovat, stiskněte dvě tlačítka vedle upevnění stolíku nebo zábrany a vysuňte jej. Pozor. Horizontální rovina stolu se může měnit s nastavením kolébky, a proto musí být předměty umístěné na stole zajištěny.zabezpieczone.

12.4 Zúžující měké vložky

Kočárek Mewa je vybaven sadou zúžujících měkčích vložek (obr. 12.4). Slouží k nastavení vnitřních rozměrů šířky a hloubky sedadla. Čalounění vložek je rychle odnímatelné, což umožňuje jejich výměnu nebo čištění.

- Montáž. Nainstalujeme vložky kdekoli ve kočárku, v jakékoli výšce se přizpůsobí požadavkům dítěte. Instalace se provádí suchým zipem na spodní, zadní a vnější straně vložky.
- Demontáž se provádí vytažením prvku - odtržením suchéhozipu od čalounění kočárku.



Obr. 12.4
Zúžující měké vložky

12.5 Turistická taška

Velká a elegantní cestovní taška je připevněna na dvě spony umístěné na vnitřní straně rukojeti. Maximální zatížení vaku je 2 kg.

12.6 Slunečník

Zdravotní kočárek Mewa může být vybaven slunečníkem, který chrání vaše dítě před sluncem..

12.7 Rukavice zimní

Na rukojeť kočárku lze připevnit dvě zimní rukavice, které zvyšují pohodlí dětského asistenta v chladnějším počasí. Nejprve sepněte dvě látkové spony a připevněte je suchým zipem na rukojeti kočárku, poté na tyto látkové spony nasadte rukavice a připevněte je pomocí patentních knoflíků. Fotografie 12.7.



Obr. 12.5
Turistická taška



Obr. 12.6
Slunečník



Obr. 12.7
Zimní rukavice

12.8 Nánožník

Zdravotní kočárek Mewa může být vybaven nánožníkem, což zvyšuje pohodlí dítěte v chladnějším počasí. Toto dodatečné vybavení vyžaduje montáž na další doplňkové vybavení - zábranu.

Chcete-li nánožník nasadit na nohy, nasadte jej zespodu na opěrku nohou a shora jej provlékněte bezpečnostní zábranou a připevněte pomocí západek k rámu kočárku. Fotografie 12.8

12.9 Moskytiéra

Zdravotní kočárek Mewa může být vybaven moskytiérou, která ztěžuje přímý kontakt hmyzu s dítětem. Toto příslušenství musí být namontováno na jiné příslušenství. Chcete-li nainstalovat moskytiéru, spojte ji se zipem na stříšce a poté zakryjte sedadlo kočárku a opěrku nohou moskytiérou a upevněte ji na stranu. Fotografie 12.9

12.10 Pláštěnka

Zdravotní kočárek Mewa může být vybaven pláštěnkou, který pomáhá chránit dítě před vlhkostí. Toto příslušenství musí být namontováno na jiné příslušenství. Chcete-li instalovat pláštěnku, položte ji na horní část celé nastavitelné stříšky s oknem a poté zakryjte sedadlo kočárku a opěrku nohou fólií. Fotografie 12.10.



Obr. 12.8
Nánožník



Obr. 12.9
Moskytiéra



Obr. 12.10
Pláštěnka

13. Technická specifikace kočárku Mewa

PARAMETRY	MEWA
délka kočárku	94-126 cm
šířka kočárku	65 cm
výška kočárku	124 - 129 cm
hmotnost celková	20 - 28 kg
nastavitelná hloubka sedadla	24*/28 cm
šířka sedadla	25*/32 cm
výška opěrky	62 cm
šířka opěrky	20** / 30 cm
vzdálenost mezi opěrkou nohou a sedadlem/ počet nastavení	17-32 / 5 pozic
délka, složený pro přepravu	Rám 84 cm / sedadlo 88 cm
šířka ve složeném stavu pro přepravu	Rám 64 cm / sedadlo 43 cm
výška, složený pro přepravu	Rám 26 cm / sedadlo 42 cm
nosnost koše	3 kg
nosnost tašky	2 kg
maximální nosnost	40 kg
výška pacienta	90-125 cm
úhel roviny sedadla / počet nastavení	ok 5,5°-21,5° / 4 pozycje
úhel nastavení opěradla / počet nastavení	ok 8°-86° / 4 pozycje + ležáca
úhel nastavení podnožky / počet nastavení	ok 64°-180° /5 pozycji

KOMENTÁŘE:

*) hodnoty jsou uvedeny s vložkami nebo **) s pelotami

Tolerance hodnoty +/- 20mm, +/- 1,5kg, +/- 1°

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických parametrů.

13.1 Skladba materiálů použitých na kočárku

Práškově lakovaná ocel a hliník, tkaniny 100% polyester a plast (PP, PVC, ABS, PA, PE, PU).

14. Dodávka a nástroje

Zdravotní kočárek Mewa se dodává v kartonu a předem smontovaný. Originální balení by mělo obsahovat následující položky:

- Skložený rám kočárku se sedákem a opěradlem, opěrkou nohou a kolečky, stříškou
- Příslušenství podle objednávky
- Uživatelská příručka se záručním listem

Před použitím zkontrolujte a ujistěte se, že jsou v krabici všechny předměty prvky a žádný z nich nebyl poškozen, např. při přepravě. Pokud zjistíte, že některá položka chybí nebo je poškozena, prosím kontaktujte prodávajícího a výrobce za účelem získání chybějících prvků nebo žádejte výměnu za nový, zcela kompletní a funkční produkt.

Multifunkčnost a rozsáhlé vybavení zdravotního kočárku Mewa umožňuje přizpůsobení osobním požadavkům uživatele. Za tímto účelem si před použitím pečlivě přečtěte celý návod. K montáži a demontáži zdravotního kočárku Mewa nejsou zapotřebí žádné nástroje, kromě nastavení výšky stupaček, kde je zapotřebí křížový šroubovák.

K montáži a demontáži zdravotního kočárku Mewa nejsou zapotřebí žádné nástroje, kromě nastavení výšky stupaček, kde je zapotřebí křížový šroubovák.

15. Montáž a demontáž kočárku

- **Montáž kočárku.** Produkt je balen v původním kartonu a je již zabalen sestavený.

Dokončete sestavení provedením následujících kroků:

- a) namontujte zadní kola na nápravu
- b) rozložte rám kočárku spolu se stupačkou a nastavte parametry:
 - uvolnění / zajištění směrového zámku předních kol
 - upravte výšku a úhel tlačné rukojeti
 - nastavte úhel sedadla
 - nastavte úhel opěradla
 - upravte délku pětibodových pásů
 - upravte výšku opěrky nohou a úhel opěrky nohou
- c) nainstalujte vhodné vybavení a upravte parametry, například:
 - upravit šířku a použitelnou hloubku sedadla (zužující měkké vložky)
 - umístěte bezpečnostní bariéru nebo terapeutický stůl
 - seřídte pásy stabilizující sed
 - upravte stříšku s oknem
 - umístěte a upravte klín
 - připevněte cestovní tašku
 - připevněte nákupní košík
 - připevněte vybrané prvky vybavení věnovaného ročním obdobím: nánožník, zimní rukavice, moskytiéru, pláštěnku, deštníko.

- **Demontáž kočárku.** Za účelem demontáže kočárku:

- a) odeberte vybavení
- b) sejměte sedadlo
- c) zablokujte přední kola, sklopte opěrku nohou a rám kočárku
- d) sejměte zadní kola
- e) klopte rám kočárku a zajistěte jej přepravním zámkem

16. Příprava k použití

Před použitím kočárku:

- Zkontrolujte, zda je kočárek a všechny jeho části v dobrém technickém stavu a není-li v dobrém technickém stavu kočárek nebo jeho jednotlivé součásti, nebo má uživatel s ním nějaké problémy či pochybnosti, nesmí se kočárek používat. Pak prosím kontaktujte prodejce a nebo výrobce.
- Zkontrolujte, zda je rám kočárku správně vyklopený a zda je skládací mechanismus a rám řádně uzavřen (zajištěn).
- Zkontrolujte, zda je sedadlo správně namontováno na rámu kočárku a že mechanismus pro připevnění sedadla k rámu kočárku je řádně uzavřen (zajištěn)
- Zkontrolujte, zda jsou všechna čtyři kola správně namontována. A zda jsou v dobrém stavu pneumatiky na všech čtyřech kolech.
- Zkontrolujte správnou funkci centrální brzdy a zabrzděte ji.
- Správně proveďte všechna nastavení a přizpůsobte kočárek potřebám dítěte, včetně nastavení vhodné hloubky terapeutického sedadla a výšky opěradla, upravte sklon terapeutického sedadla a sklon opěradla. Vhodně nastavte podnožku a upravte odpovídající délku pětibodových pásů. Zkontrolujte, zda jsou všechna nastavení správně usazena a zajištěna.
- Zkontrolujte, zda je čalounění kočárku suché.
- Zajistěte dítě všemi dostupnými stabilizačními prvky, například: pětibodovými pásy, zužujícími vložkami, pásy stabilizujícími sed, klínem, opěrkou nohou, popruhy na nohy, bezpečnostním zábradlím nebo terapeutickým stolem. To všemá chránit dítě před vypadnutím či vyklouznutím z kočárku. Zajistěte nohy dítěte proti pádu z opěrky nohou. Ujistěte se, že je všesprávně zajištěno a prvky jsou pro dítě vhodné a bezpečné.
- Ujistěte se, že je dítě vloženo do kočárku oblečené v místě kontaktu s čalouněním kočárku. To zabrání odření těla Vašeho dítěte.
- V případě dětí, které mají problémy s inkontinencí, by měl být na sedačku kočárku umístěn speciální potah, který lze zakoupit v lékárnách nebo v lékařských obchodech.
- Při použití jakýchkoli dalších pomůcek, jako jsou nafukovací trubice, odtoky, vaky, katetry atd., zajistěte, aby byly dobře chráněny proti vypadnutí, vytržení, vytažení a aby nezasahovaly do používání kočárku.

17. Používání kočárku

17.1 Přemísťování kočárku

Nejlepším způsobem, jak přemísťovat zdravotní kočárek, je řídit je po vlastní ose. V případech, kdy to není možné (např. přeprava kočárku v autě), lze z bezpečnostních důvodů zvednout a přepravovat kočárek po sejmutí příslušenství a kol, aby se snížila přepravovaná hmotnost. Při pohybu nebo zvedání rámu kočárku s připevněnými koly buďte velmi opatrní. Při přemísťování nebo zvedání rámu kočárku s připevněnými koly sklopte rám kočárku a poté držte rám kočárku

pouze za vyznačené pevné prvky rámu. Z bezpečnostních důvodů nezvedejte celý zdravotní kočárek, tj. rám se sedadlem a opěradlem, koly, opěrkou nohou a připojeném příslušenstvím, protože by to mohlo poškodit vaše zdraví. Nezvedejte zdravotní kočárek za opěrku nohou nebo bezpečnostní zábranu, terapeutický stůl nebo jiné příslušenství, protože by mohlo dojít k poškození produktu a ohrožení bezpečnosti dalších osob v okolí.

17.2 Nastupování a vystupování ze zdravotního kočárku

Při nastupování a vystupování ze zdravotního kočárku umístěte kočárek na stabilní a bezpečné místo, na ze kterého bude uživatel nastupovat. Poté, co se ujistíte, že je zabrzděna centrální brzda a že je stupačka zvednutá, aby se zabránilo šlápnutí na ni, může uživatel nastoupit.

Nestůjte na stupačce, protože by mohlo dojít k převrácení kočárku a ke zranění uživatele a je zde riziko poškození produktu.

Při nastupování a vystupování z kočárku dávejte pozor, aby dítě a žádná jiná osoba nestála na opěrce nohou, protože by mohlo dojít k poškození a zranění uživatele!!

17.3 Správná poloha v kočárku

Z bezpečnostních a zdravotních důvodů se doporučuje, aby měl uživatel pánev a záda co nejbližší k opěradlu a rovnoměrně podepřenou páteř (optimální je podpora tak, aby nevznikl volný prostor mezi sedačkou a částí páteře). Stehna by měla být po celé své délce podepřena na co největší ploše, čehož je dosaženo úpravou hloubky sedáku kočárku, a chodidla by měla spočívat na stupačce, která brání sklouznutí, udržuje optimální napětí svalů nohou a přenáší část váhy z vyšších částí těla. **POZOR!** Vzhledem k velkým možnostem nastavení kočárku při úhlovém nastavení sedadla a úhlové nastavení opěradla, je možné nastavit polohu, ve které je hlava dítě pod pánevní linií. Je zakázáno používat takovou polohu, která by mohla vést k zadušení, nebo udušení dítěte!

17.4 Jízda s kočárkem

Při jízdě s kočárkem vždy držte tlačnou rukojeť, abyste zabránili inertnímu pohybu kočárku. Uvolněte centrální brzdu, přidržte stisknutou rukojeť a tlačte kočárek bezpečným směrem..

17.5 Pohyb na nerovném povrchu - svahu

Při jízdě do kopce nebo z kopce vždy používejte kočárek proti směru jízdy.

Omezte rychlost na svazích a pohybujte se co nejpomaleji. Asistent manipulující s kočárkem (rodič, opatrovník) musí mít dostatečnou sílu k udržení stability zdravotního kočárku. Vždy pamatujte na to, že se poloha těžiště zdravotního kočárku mění při projíždění nerovného, nebo svažitého terénu. V takovém případě buďte obzvláště opatrní a zajistěte kočárek.

Pokud používáte rampy, ujistěte se, že je rampa vhodná a že kola kočárku jsou na svém místě dostatečně vysoko, aby bylo možné vyjízďet po rampě a aby rám zdravotního kočárku nepřišel do styku s rampou a požádejte o pomoc druhou osobu, protože existuje riziko převrácení kočárku, poškození výrobku a zranění uživatele.

17.6 Překonávání prahů nebo obrubníků

Při přejíždění malých překážek (malé prahy, malé obrubníky atd.) Nohou zatlačte na nášlapný pedál a tlačnou rukojeť přitlačte směrem dolů a směrem k sobě, zvedněte přední kola kočárku a opatrně překonejte překážku. Poté pomalu zvedněte tlačnou rukojeť směrem nahoru od země, zvedněte zadní kola kočárku a opatrně projedte zadními koly přes překážku..

17.7 Přeprava v automobilu a v jiných vozidlech

- Chcete-li přepravovat kočárek Mewa v autě, demontujte z něj veškeré příslušenství a uschovejte je na bezpečném místě. Poté kočárek rozeberte a uložte do zavazadlového prostoru.
- Pokud demontovaný kočárek není přepravován v prostoru automobilu odděleně od prostoru pro cestující, musí být rám kočárku bezpečně připevněn k vozidlu. K tomu můžete použít nepoužívané bezpečnostní pásy..
- Přeprava zdravotního kočárku v jiných dopravních prostředcích, například ve vlacích, tramvajích, autobusech, letadlech, lodích atd. Informujte se na ni u osob odpovědných za přepravu v těchto prostředcích a zajistěte společně podmínky bezpečné přepravy zdravotního kočárku do cíle.
- Abyste mohli kočárek přepravovat v jiných prostředcích, demontujte veškeré příslušenství a uschovejte je na bezpečném místě. Poté demontujte zdravotní kočárek (viz kapitola 14) a umístěte jej do prostoru pro úschovu zavazadel. Poté kočárek rozeberte a uložte do zavazadlového prostoru. Pokud demontovaný kočárek není přepravován v prostoru odděleně od prostoru pro cestující, musí být rám kočárku bezpečně připevněn k vozidlu. Kočárek Mewa by neměl být používán jako sedadlo pro přepravu dítěte ve vozidle.

17.8 Čištění a péče

Čalounění lze prát pouze opatrně, při teplotě do 30 ° C.

Neprat v pračce. Skvrny by měly být odstraněny, jakmile se objeví na povrchu kočárku.

POZOR! Nečistěte chemikáliemi obsahujícími rozpouštědla a bělidla.

Výrobce neručí za škody způsobené použitím nevhodných čisticích prostředků.

Neotírejte - oděrky rozšíří skvrnu na větší plochu a mohou narušit texturu látky a zničit její povlak.

Před použitím se ujistěte, že je produkt vždy suchý.



Mýt pouze ručně



Nebělit



Nesušit v bubnové
horizontálně



Sušit pouze



Nežehlit sušičce

Manipulace se skvrnami od vody, a skvrnami jako jsou skvrny od jídla, pití a rostlinného oleje:

- Skvrnu osušte působením tlaku po celém jejím povrchu bílým papírovým ručníkem, ubrouskem, nebo savým čistým hadříkem.
- Navlhčete malý kousek látky jemným roztokem čisticího prostředku a teplou (nebo studenou vodou v případě krevních skvrn) a opláchněte skvrnu odstraněním zvenčí dovnitř tak, aby se zabránilo jejímu zvětšení.
- Nepoužívejte příliš vlhký hadřík, protože by se spotřebovalo příliš mnoho kapaliny a to může po zaschnutí způsobit zvlnění nebo zvětšení skvrny a zničení čalounění nebo pěny uvnitř.
- Možná budete muset výše uvedený krok opakovat v závislosti na typu skvrny i množství obarveného materiálu. Výše uvedená akce by se měla opakovat, dokud není odstraněna skvrna. Vždy ale pamatujte na odstranění přebytečné vlhkosti ze skvrny před opětovným opláchnutím.
- Poté materiál opláchněte pouze vlažnou vodou bez čisticího prostředku čistou houbou, nebo čistým bílým suchým hadříkem. Vysušit.

18. Uskladnění kočárku

Kočárek by měl být skladován v čisté, suché a dobře větrané místnosti, nejlépe při teplotě 0-35 ° C

18.1 Příprava kočárku na dlouhodobé skladování

Za účelem přípravy kočárku Mewa na dlouhodobé skladování zajistěte výrobek a proveďte všechny servisní činnosti uvedené v kapitole „Pravidelné kontroly“, jako by jejich čas uplynul. Kočárek skladujte v čisté, suché a dobře větrané místnosti.

18.2 Ochrana proti korozi

Aby se zabránilo poškození kočárku korozí, neměl by se kočárek používat ani jej ponechávat ve vlhkém prostředí.

Pokud, už kočárek navlhne, otřete všechny mokré části měkkým suchým hadříkem a ochraňte lehkým konzervačním prostředkem na bázi oleje. To neplatí pro čalounění kočárku, jehož čištění a údržba jsou podrobně popsány v kapitole Čištění a péče. kočárek je standardně potažen vysoce kvalitními potahy. V případě poškození laku by mělo být poškození zajištěno opravou laku navrženého výrobcem.

Pravidelné čištění a mazání mechanismů zdravotního kočárku lehkým olejem zaručuje jeho dlouhé a bezproblémové používání..

19. Znovu použití

Produkt lze znovu použít. Všechny opakovaně použitelné výrobky podléhají zvláštní zátěži. V důsledku toho se jejich vlastnosti a výkon mohou od nového produktu lišit natolik, že je během jejich používání ohrožena bezpečnost pacientů a třetích osob. Při správné péči a údržbě si produkt udržuje svoji kvalitu po dobu 3 let, což je očekávané období jeho používání..

K opětovnému použití:

- Demontujte všechny čalouněné prvky a nahraďte je novými.
- Rám kočárku s koly a vodicími prvky by měl být důkladně vyčištěn a dezinfikován čisticími a dezinfekčními prostředky dostupnými na trhu.
- Poté musí být výrobek zkontrolován autorizovaným servisním střediskem (viz kapitola 24) nebo výrobcem, zda není opotřebovaný nebo poškozený.
- Veškeré opotřebované díly a součásti, které se nehodí, nebo nejsou vhodné pro uživatele, musí být vyměněny za nové.
- Takto připravený produkt lze znovu použít.

20. Servis a pravidelné kontroly

Aby bylo možné používat zdravotní kočárek Mewa bezpečně a bezporuchově, měl by být pravidelně a důkladně kontrolován a udržován, jak je uvedeno v tabulce níže.

V situaci, kdy uživatel zdravotního kočárku není schopen výše uvedené činnosti provádět sám, měl by kočárek odeslat do specializovaného servisního střediska pro zdravotní kočárky nebo přímo k výrobcovi, který jej řádně zkontroluje a provede nezbytné servisní činnosti. Tyto činnosti mohou být dodatečně s platné.

POZOR! Výrobce odpovídá za technické závady nebo poškození kočárku, které vzniknou pouze při řádném používání kočárku. Odpovědnost za správnou funkci kočárku je na výrobcovi pouze tehdy, jsou-li striktně dodržována všechna doporučení výrobce.

Veškeré opravy by měly být prováděny ve specializovaných autorizovaných dílnách (viz bod) nebo přímo u výrobce. Ke kočárku lze používat pouze originální náhradní díly dodávané nebo doporučené výrobcem.

Opravy kočárku prováděné jinými osobami než autorizovaným servisním střediskem nebo výrobcem ruší platnost záruky. Výrobce neodpovídá za zranění osob nebo poškození výrobku, které může být důsledkem oprav provedených jinými osobami než autorizovaným servisním střediskem nebo výrobcem. Výrobce odpovídá za správnou funkci kočárku, pouze pokud je zakoupen ve specializovaném zdravotnickém obchodě.

Servisní činnosti které by měly být prováděny:

- **Pokaždé před použitím kočárku**
 - Kontrola účinnosti centrální brzdy - Při aktivované centrální brzdě musí být obě zadní kola zdravotního kočárku zablokována a nesmí se otáčet.

- Kontrola připevnění konstrukčních prvků - Zkontrolujte všechny mechanismy kočárku a jeho pohyblivých prvků, zejména věnujte pozornost: správnému upevnění terapeutického sedadla s opěradlem k rámu kočárku, správnému upevnění všech čtyř kol, správnému fungování pětibodových bezpečnostních pásů, správně zajištěnému nastavovacímu mechanismu úhlu sedadla, správně zajištěnému mechanismu úhlového nastavení opěradla a správné instalaci opěrky nohou.
- Kontrola stavu pneumatik - Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny nebo opotřebený pneumatiky na všech čtyřech kolech.
- Kontrola pevných prvků rámu, sedadla s opěradlem a rámu stupaček - Vizuálně zkontrolujte stav konstrukčních profilů. Tyto prvky nesmí být poškozeny nebo prasknuty.
- **Každý měsíc** ○ Čištění kočárku - Všechny pohyblivé části, ložiska a seřizovací mechanismy očistěte měkkým hadříkem a poté je namažte několika kapkami lehkého oleje. Dbejte na to, abyste neznečistili čalounění kočárku nebo vlastní oblečení.
 - Kontrola vůle všech šroubových spojů - Pečlivě zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby aknoflíky na kočárku správně utaženy.
- **Každých šest měsíců** ○ Kontrola čistoty čalounění a kontrola celkového stavu kočárku - Nedovolte, aby byl kočárek zanedbán, jak je popsáno v kapitole "Čištění a péče"
 - Zkontrolujte celkový stav kočárku. Nedovolte, aby byl kočárek zanedbáván.

21. Využití

Likvidace a recyklace: Použitý zdravotní kočárek by měl být odevzdán do recyklačního centra v souladu s předpisy platnými ve vaší zemi.

22. Soulad s požadavky na zdravotnické prostředky

Zdravotnický prostředek I. třídy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017. o zdravotnických prostředcích. Výrobce na výrobek vydal příslušné prohlášení o shodě, které lze nalézt na www.mywam.eu

23. Poznámky

24. Seznam autorizovaných servisních míst

POLSKA

MyWam Kupiec, Bartold, Angielska ul. Szczecińska 10, 41-600 Chorzów, Polska

ul. Szczecińska 10, 41-600 Chorzów, Polska

tel: +48 32 733 11 31

strona internetowa: www.mywam.eu

adres e-mail: mywam@mywam.pl

25. Záruční list

Sériové číslo:

Datum zakoupení: - -

Razítko a podpis prodejce:

Záruční podmínky

- Výrobce poskytuje kupujícímu záruku na zakoupený kočárek po dobu 24 měsíců od data nákupu. Vady odhalené během tohoto období budou bezplatně odstraněny.
- Kupující reklamující kočárek by měl kočárek doručit prodávajícímu nebo výrobci na vlastní náklady v obalu spolu s částmi kočárku chráněnými proti poškození.
- Poškození způsobené nedostatečným zajištěním dodávky kočárku a jeho součástí nepodléhá záručním opravám.
- Žadatel nemůže požadovat plnění, pokud kočárek a jeho součásti nesprávně označí nebo nezajistí při přepravě.
- Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy kočárku.
- V rámci záruční opravy nelze provádět činnosti uvedené v příručce, které je uživatel povinen provádět samostatně a na své náklady.
- Kočárek by měl být používán v souladu s tímto návodem k použití.
- Používání kočárku v rozporu s jeho určením a v rozporu s tímto návodem k použití nebo v rozporu se zásadami správného používání vede ke ztrátě záruky.
- Jakékoli změny v konstrukci kočárku ruší platnost záruky.
- Na poškození kočárku způsobené nesprávným používáním, nesprávnou údržbou, nesprávným skladováním kočárku, mechanickým poškozením a přirozeným oděrem a opotřebením dílů (např. čalounění, kola) se záruka nevztahuje. Jejich oprava je na náklady uživatele.
- Výrobce varuje před prováděním záručních oprav v neautorizovaných servisních střediscích. Taková oprava nebo neoprávněná úprava kočárku ruší platnost záruky.
- Záruční list je platný za předpokladu, že obsahuje: datum prodeje opatřeným razítkem prodávajícího, podpisem prodejce, typem a sériovým číslem kočárku.
- Záruční list je platný za předpokladu, že neobsahuje žádné výmazy a opravy.
- Výrobce kočárků provozuje placený po záruční servis.
- Ve věcech, na které se nevztahuje tento záruční list, se použijí ustanovení občanského zákoníku.
- Veškeré záležitosti související se zárukou a reklamací kočárku by měly být směřovány na prodejce nebo přímo na výrobce.