

BREEZY PARIX²

- VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Tel: 775 660 333



Bubnové brzdy v základním provedení.

BREEZY PARIX²

KÓD ZP:

5014610

OBJEDNACÍ LIST Platnost od 01. 05. 2023 do vydání aktualizace.

Kontakt			
Příjmení:			
Jméno:			
Ulice:			
Město:		PSČ:	
E-mail:			
Telefon:			
Zdravotní pojišťovna:			

Dotazník	
Klient se dověděl o produktu na základě:	
<input type="checkbox"/> Informace od známého	<input type="checkbox"/> Katalogu/brožury
<input type="checkbox"/> Newsletteru	<input type="checkbox"/> Časopisu
<input type="checkbox"/> Internetu	<input type="checkbox"/> Výstavy
<input type="checkbox"/> Sociální sítě	<input type="checkbox"/> Předváděcí akce
<input type="checkbox"/> Obchodního zástupce	
<input type="checkbox"/> Jinde	

Informace o objednavce			
<input type="checkbox"/> Objednávka	<input type="checkbox"/> Kalkulace	<input type="checkbox"/> Individuální úprava	
Datum sepsání objednávky:			
Číslo objednávky:			
Sepsal:			
Místo sepsání:			

Hmotnost uživatele		
Maximální nosnost:	125 Kg	
Váha uživatele:	Kg	
Základní cena:	9.709,- Kč	
Úhrada ZP:	8.999,- Kč	
Doplatek klienta:	709,- Kč	

JAK ZAMĚŘIT MECHANICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK**Řiďte se prosím níže uvedeným postupem zaměření:**

Níže uvedená metoda je doporučena na základě rozsáhlých praktických zkušeností.

U individuálních případů se může postup lišit.

Šířka sedu (ŠS):

- a) U uživatele: Mezera mezi kyčlí a bočnicí na levé a pravé straně by v součtu měla být cca 10 - 20 mm (dlaň ruky).
b) Na vozíku: Od vnější strany trubky rámu k vnější straně trubky rámu!!!

Hloubka sedu (HS):

- a) U uživatele: U správného sezení: Mezera mezi potahem sedu a lýtkem by měla být na 2 - 3 prsty (cca 30 - 60 mm).
Dejte pozor na nastavení potahu zádové opěrky, příp. Jay zad či oblečení při zaměřování.
b) Na vozíku: Vzdálenost od předního okraje trubky zádové opěrky po přední hranu potahu sedu.

Výška sedu v přední části rámu:

- a) U uživatele: Měřeno při sedu uživatele, úhel mezi holení a stehnem je 90°.
Vzdálenost od kolenní jamky k podlaze.
b) Na vozíku: Od předního okraje potahu sedu (ne sedacího polštáře) k podlaze.
Výška sedu v přední části rámu musí být minimálně o 30 mm delší než naměřená délka holeně uživatele.
Nezapomeňte uvést výšku sedacího polštáře!

Výška sedu v zadní části rámu:

- Na vozíku: Od zadního okraje potahu sedu (ne sedacího polštáře) k podlaze.
Poznámka: Maximální rozdíl mezi výškou sedačky v přední a zadní části může být jen 110 mm.

Výška zádové opěrky:

- a) U uživatele: Výška zádové opěrky závisí na stupni postižení klienta!!!
Nedoporučuje se, aby zádová opěrka končila těsně pod lopatkou.
Potah zádové opěrky by měl tedy končit cca 10 - 20 mm pod lopatkou.
b) Na vozíku: Od trubek sedačky po horní okraj potahu zádové opěrky.
Poznámka: Schopnost uživatele sedět vzpřímeně má podstatný vliv na výběr výšky zádové opěrky.

Úhel zad:

- Poznámka: Výška zádové opěrky závisí na stupni postižení klienta!!!
Na vozíku: 0° je úhel 90° svírající se základnou. Negativní úhly jsou <90° a pozitivní úhly jsou >90°

Těžiště

- Na vozíku: Měřeno od přední strany trubky zad po střed osy zadního kola.

TECHNICKÁ DATA**Maximální celková šířka vozíku:**

Sklon kol	Zadní kola 24"
0°	ŠS + 200 mm

Maximální celková výška vozíku:

950 mm

Maximální celková délka vozíku:

1060 mm

Hmotnost od:

18 kg

Všechny změny mají vliv na výslednou konfiguraci vozíku.


Výrobní tolerance všech rozměrů je +/- 1 cm.

Produkt je zkoušen podle normy ISO 7176-19 a ISO 16840-4 proto je schválen pro přepravu ve vozidle.

Při přepravě musí být vozík bezpečně zajištěn a upoután proti pohybu ve vozidle.

ROZMĚRY KLIENTA - PANÁČEK

a)	Od vrcholu hlavy k sedačce	mm
b)	Od horní části ramene k sedačce	mm
c)	Od podpaždí k sedačce	mm
d)	Od lokte k sedačce	mm
e)	Od horní části pánve k sedačce	mm
f)	Šíře ramen	mm
g)	Šíře hrudníku (zad)	mm
i)	Šíře kyčlí	mm
j)	Skutečná hloubka sedu od zad po lýtko	mm
m)	Délka chodidel	mm
n)	Délka levé holeně	mm
	Délka pravé holeně	mm
o)	Skutečná šíře sedu	mm

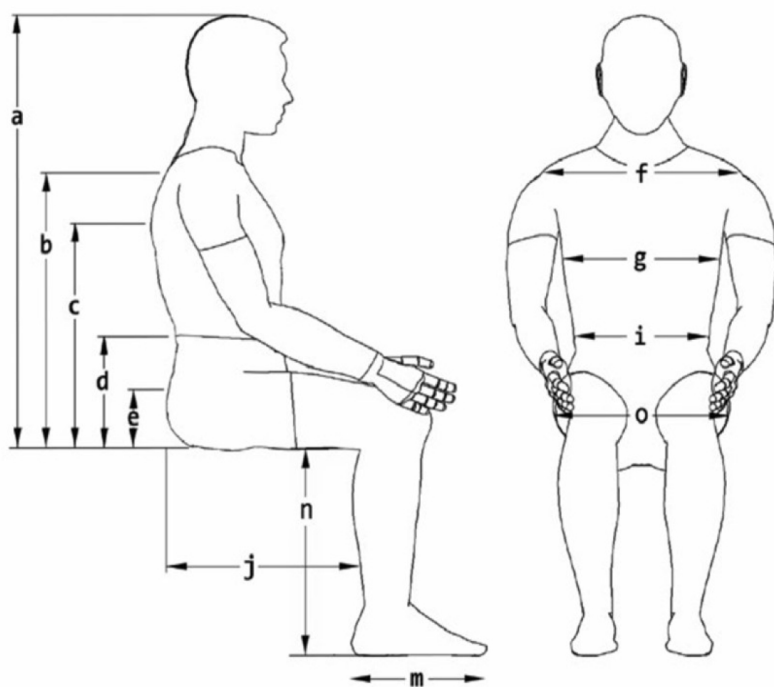

POZNÁMKY

ŠÍŘE SEDAČKY V MM - měřeno od vnější strany trubky rámu k vnější straně trubky rámu

MM	380	405	430	455	480	520
	○	○	○	○	○	○

HLOUBKA SEDU V MM - měřeno od předního okraje trubky zádové opěrky po přední hranu sedu

MM	415
	●

HLOUBKA SEDU JE NASTAVITELNÁ V ROZMEZÍ OD 415 DO 440 MM

VÝŠKA SEDU V PŘEDNÍ ČÁSTI RÁMU V MM

MM	485
	●

VÝŠKA SEDU V PŘEDNÍ ČÁSTI RÁMU JE NASTAVITELNÁ V ROZMEZÍ OD 460 DO 510 MM

SEDAČKA		Kód ZP	Úhrada ZP	Doplatek
Potah sedu				
<input checked="" type="checkbox"/>	PAR010001	Polstrovaný nylonový potah		
Sedací polštář				
<input checked="" type="checkbox"/>	PAR010002	Sedací polštář molitanový 5 cm		
<input type="checkbox"/>		Sedací polštář z lepené gumopěny 5 cm	5002214	1 000,50 Kč 79,50 Kč
<input type="checkbox"/>	JAY020002	Jay Basic	5002147	1 000,00 Kč 122,00 Kč
<input type="checkbox"/>	JAY020003	JAY Soft Combi	5002148	2 199,95 Kč 268,05 Kč
JAY Sedačky - KOMPLETNÍ NABÍDKU SEZENÍ A ZÁDOVÝCH OPĚREK JAY NALEZNETE V NAŠEM OBJEDNACÍM LISTĚ JAY				

OPĚRKA ZAD				
Potah opěrky zad				
<input checked="" type="checkbox"/>	PAR030001	Vypínatelná zádová opěrka		
Ručky pro doprovod				
<input checked="" type="checkbox"/>	PAR030002	Pevné rukojeti pro doprovod		

BOČNICE				
<input checked="" type="checkbox"/>	PAR040001	Standardní bočnice s krátkou / dlouhou područkou (posuvné)		
<input type="checkbox"/>	PAR040002	Výškově stavitelné deskové bočnice s krátkou / dlouhou područkou (posuvné)	5002215	3 246,30 Kč 360,70 Kč

STUPAČKY		Kód ZP	Úhrada ZP	Doplatek
<input checked="" type="checkbox"/>	PAR050001	Úhlově přenastavitelná stupátka, plastová, s patní páskou		
Polohovací stupačka včetně tvarované lýtkové opory/pár				
<input type="checkbox"/>	PAR050003	VLEVO	5002216	4 878,90 Kč 542,10 Kč
<input type="checkbox"/>	PAR050004	VPRAVO		
Opora pahýlu pro amputáře				
<input type="checkbox"/>	PAR050006	VLEVO	5002217	3 498,30 Kč 388,70 Kč
<input type="checkbox"/>	PAR050007	VPRAVO	5002217	3 498,30 Kč 388,70 Kč
Vodorovná opora nohy, bez možnosti polohování - opora lýtky + stehna				
<input type="checkbox"/>	PAR050042	LEVÁ/PRAVÁ - JEDEN KUS		2 790,00 Kč

PŘEDNÍ KOLEČKA				
<input checked="" type="checkbox"/>	PAR080001	8" x 1 1/4" plné		
<input type="checkbox"/>	PAR080002	8" x 50 plné		725,00 Kč

HNACÍ KOLA				
<input checked="" type="checkbox"/>	PAR070001	24" x 1" plná guma, obruč hliníková		

BRZDY		Kód ZP	Úhrada ZP	Doplatek
<input checked="" type="checkbox"/>	PAR060001	Standardní brzdy		
<input type="checkbox"/>	PAR060002	Prodloužení brzd	5002218	533,70 Kč 59,30 Kč
<input checked="" type="checkbox"/>	PAR060003	Bubnové brzdy		

PŘÍSLUŠENSTVÍ				
<input type="checkbox"/>	PAR090001	Držák berlí		490,00 Kč
<input type="checkbox"/>	PAR090004	Nasouvací stoleček (pouze pro širší sedu od 400 do 480 mm)		4 900,00 Kč
<input type="checkbox"/>	PAR090006	Jistící kolečko, Pár	5002220	2 167,20 Kč 240,80 Kč
<input type="checkbox"/>	PAR090007	Jistící kolečko, kus		
<input type="checkbox"/>	PAR090008	Nášlapná patka (na trubce rámu)		350,00 Kč
<input type="checkbox"/>	PAR090009	Fixační pás dvojbodový	5002221	573,30 Kč 63,70 Kč
<input type="checkbox"/>	PAR090002	Chráníče drátů kol transparent (24")	5002219	3 158,10 Kč 350,90 Kč
<input type="checkbox"/>		Pogumované obruče	5002269	8 181,00 Kč 909,00 Kč
<input type="checkbox"/>		Návleky na obruče	5002264	3 088,80 Kč 343,20 Kč

BARVA				
<input checked="" type="checkbox"/>	PAR090023	Stříbrná lesklá		

POZNÁMKY/POŽADAVKY NA INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY



Věnujte prosím pozornost řádnému vyplnění všech informací pro zajištění správné konfigurace vozíku.
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.
Za tiskové chyby neručíme. Vyhraujeme si právo jakýchkoliv změn.

BREEZY PARIX²

Základní cena		Kč
Cena příslušenství		Kč
Celková cena		Kč
Úhrada ZP		Kč
Doplatek Klienta		Kč

POTVRZENÍ KONFIGURACE

KLIENT SI INVALIDNÍ VOZÍK VYZKOUŠEL A SOUHLASÍ S VÝŠE UVEDENOU KONFIGURACÍ.

Den

Měsíc

Rok

Podpis

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa, číslo průkazu totožnosti, IC, DIC, kontaktní adresa, telefon, fax, emailová adresa, údaje potřebné k poskytování služeb) obsažených v tomto formuláři firmou MEDICCO, s. r. o. pro účely zpracování této objednávky.



Strašnická 1202/23
E-mail: info@repom.cz 102 00 Praha Hostivař

MEDICCO s.r.o

Heršpická 1013/11d

639 00 Brno

Tel.: (+420) 800 900 809

Email: info@medicco.cz; info@sunrisemedical.cz

WWW: www.medicco.cz; www.sunrisemedical.cz

volejte zde : 775 660 333